

PIED ROULANT

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce pied roulant qui a fait l'objet de tous nos soins lors de sa fabrication et lors du contrôle qualité. Ce produit vous donnera entièrement satisfaction pendant de longues années. Avant de l'utiliser, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

Conformités réglementaires

Marquage CE suivant le Règlement 2017/745 et les dispositions des Directives 2014/35/UE, CEM 2014/30/EU et les normes harmonisées suivantes: EN 60.598-1, EN 60.598-2-25, EN 60.601-1-2, EN 60.601-2-41, EN 60.601-1..

L'emballage contient les pièces suivantes

Tube avec embout plastique
Base à 5 branches + 5 roulettes
Capot protecteur en plastique
Rondelle
Vis de fixation
Clé Allen
Notice d'utilisation

Utilisation

Ce pied est conçu pour s'adapter aux lampes LID (*fixation par 4 vis*).


Instructions de maintenance et de nettoyage

Le montage doit être effectué par des personnes qualifiées. Tous les produits de nettoyage (*désinfectant, détergent...*) peuvent être utilisés.

En cas de tache rebelle et incrustée, n'hésitez pas à utiliser un nettoyeur à base de poudre abrasive.

Instruction de montage

1. Soulever le capot protecteur le long du tube.
2. Emboîter le tube et son embout plastique dans la base à 5 branches.
3. Visser la vis avec la rondelle à l'aide de la clé Allen (*fournies*).
4. Replacer le capot protecteur.
5. Fixer la lampe sur la base à l'aide des 4 vis (*fournies*).

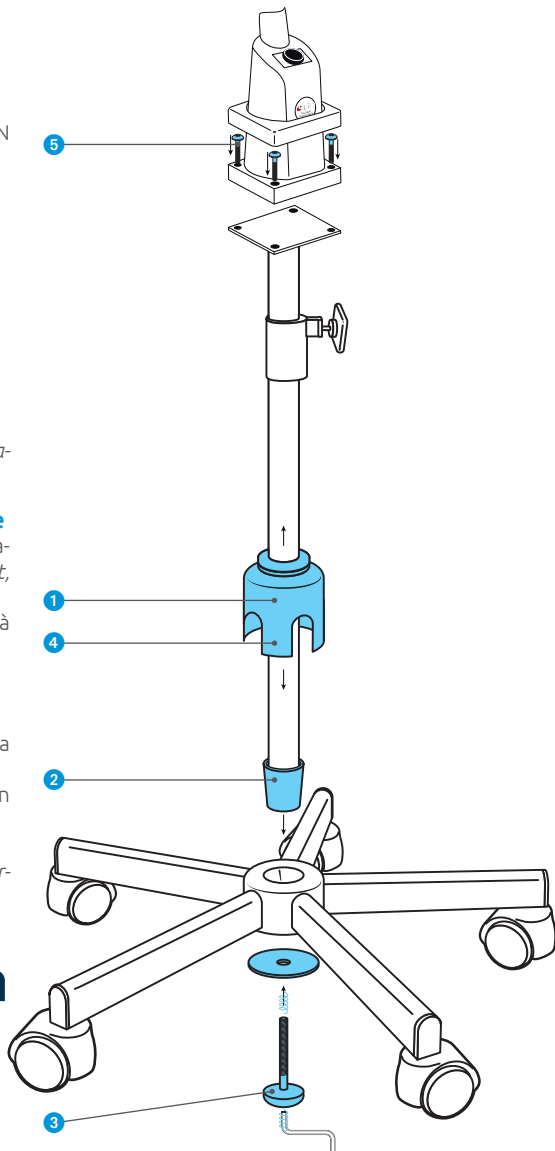

Fin de vie du produit **ecosystem**

LID adhère à www.ecosystem.eco.

TROLLEY BASIS

Thank you and congratulations for purchasing this trolley base which has been the object of all our care and attention during its manufacture and quality control. This product will give you full satisfaction for many years. Before using it, you should read this notice carefully.

Legal Compliance

CE marking according to Regulation 2017/745, Directives 2014/35/UE, EMC 2014/30/EU and the following harmonized standards: IEC 60.598-1, IEC 60.598-2-25, IEC 60.601-1-2, IEC 60.601-2-41, IEC 60.601-1.

The package contains the following parts

Tube with plastic cap
5 star base + 5 wheels
Plastic cover
Washer
Mounting screws (*base to tube*)
Allen key
User manuel

Uses

This trolley base is specially designed to fit to LID lamps (*with 4 screw*).

Maintenance instructions and cleaning

Mounting the trolley base should be performed by qualified persons.
All cleaning products (*disinfectant, detergent, etc...*) can be used. Difficult stains or spots can be removed with an abrasive cream.

Installation instructions

1. Slide the protective cover along the tube
2. Fit the tube and its plastic cap into the base
3. Tighten the screw with the washer using the provided Allen key
4. Replace the protective cover
5. Fix the lamp on the mounting platform with 4 screws (*provided*)

PIE CON RUEDAS

Le agradecemos y le felicitamos por haber adquirido este pie con ruedas, que hemos fabricado con tanto cuidado y que sigue un estricto control de calidad. Este artículo le satisfará plenamente durante muchos años. Antes de su uso, le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones y las conserve.

Cumplimiento de la normativa

Marcado CE según Reglamentos 2017/745, las disposiciones de las Directivas 2014/35/UE, EMC 2014/30/EU así como las siguientes normas: IEC 60.598-1, IEC 60.598-2-25, IEC 60.601-1-2, IEC 60.601-2-41, IEC 60.601-1.

El embalaje contiene las siguientes piezas

Tubo con conector de plástico
Base de 5 patas + 5 ruedas
Cubierta protectora de plástico
Arandela
Tornillo de fijación
Llave Allen
Instrucciones de uso

Uso

Este pie está diseñado para adaptarse a dos lámparas LID (*fijación mediante 4 tornillos*).

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

El montaje debe ser realizado por personal cualificado. Se puede usar cualquier producto de limpieza (*desinfectante, detergente, etc.*). En caso de mancha rebelde e incrustada, no dude en usar un limpiador abrasivo en polvo.

Instrucciones de montaje

1. Levante la cubierta de protección a lo largo del tubo
2. Monte el tubo y el conector de plástico en la base de 5 patas
3. Apriete el tornillo con la arandela, con la ayuda de la llave Allen (*suministrados*)
4. Vuelva a colocar la cubierta protectora.
5. Fije la lámpara a la base con los 4 tornillos

